


Mepilex®

Apósito absorbente de espuma de poliuretano con Tecnología Safetac y microadherencia selectiva

Film posterior de poliuretano

- Permeable a gases.
- Impermeable a líquidos y bacterias.
- Máxima evaporación y absorción.

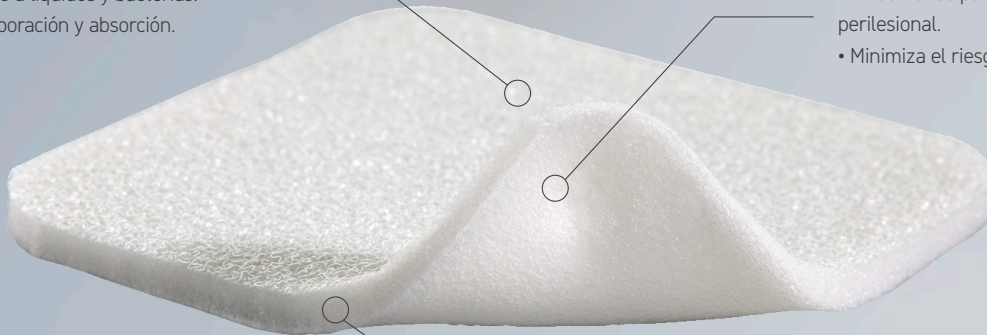

Suave capa de silicona Safetac®

- Atraumático para la herida y la piel perilesional.
- Minimiza el riesgo de maceración.

Cuerpo absorbente de espuma de poliuretano

- Absorbe el exudado.
- Mantiene la integridad.
- Funciona bajo compresión.
- Se adapta a los contornos del cuerpo.

Safetac®
TECHNOLOGY


Safetac® Menos trauma. Menos dolor™

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva de suave silicona. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.es



Desprendimiento de la piel con adhesivos convencionales

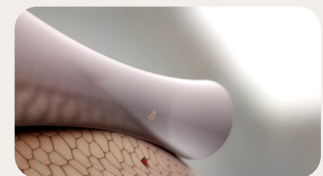


Sin desprendimiento de piel con la Tecnología Safetac


- Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la retirada.
- Absorbe eficazmente, incluso bajo compresión.
- Gran adaptabilidad debido al film rugoso superior.
- Minimiza el riesgo de maceración.


Mölnlycke®


Forma de utilización Mepilex®

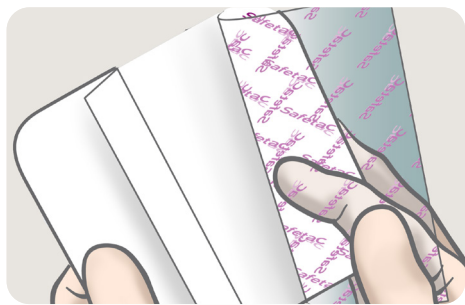

Limpiar la herida. Retirar el film protector.

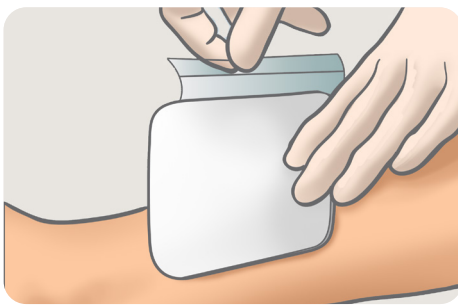

Mepilex® debe cubrir la piel de alrededor al menos 2 cm. Colocar la cara adherente sobre la herida. No estirar.

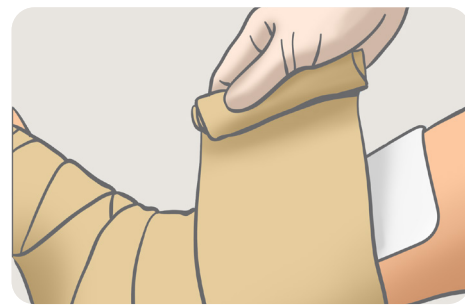

Cuando sea necesario, fijar Mepilex® con un vendaje u otra fijación..

Beneficios de Mepilex®

- Puede permanecer en la herida durante varios días, dependiendo de las condiciones de la misma.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- Puede cortarse a medida.
- Minimiza el traumatismo y dolor durante los cambios de apósito.
- Puede quitarse y adaptarse de nuevo a la herida sin perder sus propiedades de adherencia.
- Puede usarse junto a hidrogeles.

Indicaciones

Mepilex® puede usarse en un amplio rango de heridas exudativas, tales como úlceras por presión, úlceras en miembros inferiores o pies, heridas con la piel de alrededor frágil .

Nota

Mepilex® no debe usarse en heridas infectadas sin consultar a un profesional sanitario.

Presentaciones Mepilex® (Sobres estériles)

Ref.	Tamaño cm	Uds/RET	Uds/TRP
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20



Más información en molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª Planta - 28050 Las Tablas (Madrid). Tel: 914841320. Mölnlycke, Mepilex y Safetac son marcas y logotipos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care © 2024 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.

