



Proporcionando
um cuidado gentil
para uma
cicatrização eficaz
das queimaduras

O Poder da Gentileza



Chega de traumas

No mundo inteiro, pacientes com queimaduras já sofreram o bastante. A cura não se limita a sobreviver. Ela inclui voltar à vida cotidiana. Portanto, sobreviventes de queimaduras precisam do melhor tratamento possível que reduza o trauma adicional da maneira mais gentil.

A abordagem holística da Mölnlycke ao tratamento de queimaduras começa no primeiro dia da lesão e continua durante toda a jornada de cura, incluindo controle de cicatrizes pós-queimadura.



Chega de concessões

1

Cicatrização eficaz das queimaduras

A cicatrização da ferida sem intercorrências deve ser promovida. Usar curativos que minimizam o risco de maceração, fornecem uma barreira antimicrobiana e permitem um longo tempo de uso é essencial. Dor e estresse contribuem para a demora na cura da ferida, portanto, é essencial selecionar um curativo que minimize trauma adicional.¹

2

Satisfação do paciente

Sentir dor e angústia não é apenas uma base ruim para a cicatrização, como também causa agonia ao paciente. Escolher um curativo que minimize a dor e a ansiedade na troca de curativo contribuirá para maior satisfação do paciente.

3

Economia

A economia é um importante fator na implementação de um regime de tratamento para queimaduras. Curativos associados a menos trocas de curativo, tempo de enfermagem ou uso de analgésicos podem reduzir o custo total de cuidado.

Permita que as diretrizes da Sociedade Internacional de Queimaduras (ISBI) conduzam a terapia

As diretrizes do ISBI apresentam as características necessárias para um curativo ideal para queimaduras. Garanta que os produtos que você usa cumpram esses critérios o máximo possível para definir a melhor base possível para uma cicatrização gentil.

O Poder da Gentileza

Queimaduras são doloridas e costumam impor risco à vida da vítima. Ao reduzir a dor, o sofrimento e a ansiedade, podemos apoiar um processo de cicatrização eficaz e melhorar os resultados.

Nosso portfólio de produtos não faz concessões. Fornece cuidados eficazes e reduz trauma e sofrimento adicionais em todas as etapas do cuidado. Isso significa a cicatrização da ferida sem intercorrências, melhor custo/benefício e melhor experiência do paciente²⁻⁶.

Chamamos isso de Poder da Gentileza.



Minimizar o trauma desde o primeiro dia

O tratamento precoce eficaz tem um impacto significativo sobre os resultados da cicatrização. Desde o primeiro dia, você não precisa fazer concessões. O tratamento pode começar usando um curativo que forneça uma camada antimicrobiana, controle de exsudato e minimização da dor e trauma, o que proporciona uma boa base para o tratamento das queimaduras.

Comece bem o processo de cicatrização

- Proporcionar uma barreira antimicrobiana
- Controlar o exsudato
- Minimizar a dor e trauma


Redução da dor e trauma proporcionada pela tecnologia Safetac^{®2-3}:

Não adere ao leito da ferida úmido

Remoção gentil

Trauma minimizado ao leito da ferida e pele ao redor

Menos dor nas trocas de curativo

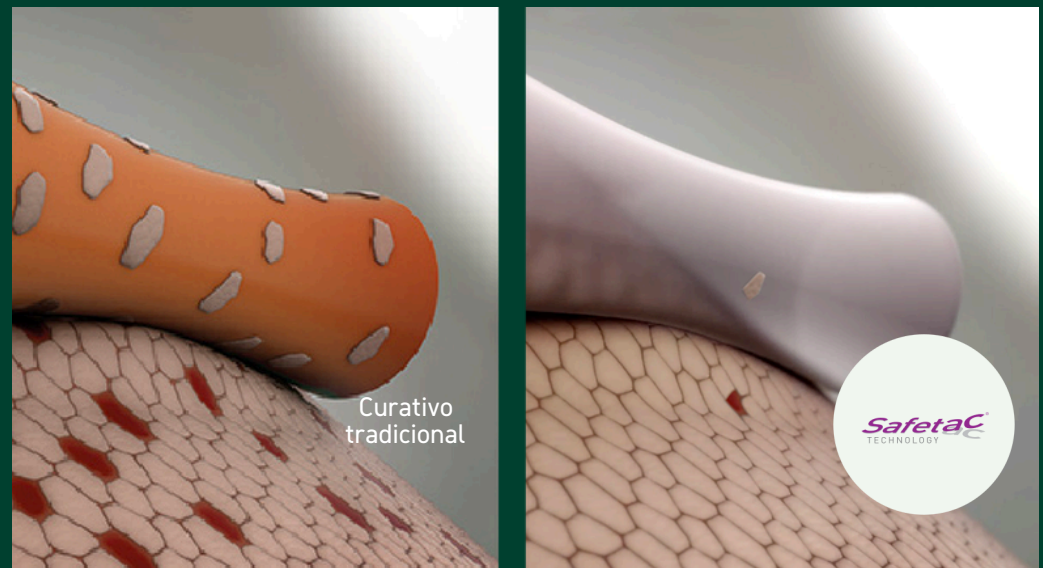

Uma jornada de cuidado gentil

para queimaduras

Fixação

Tubifast®

Malha tubular indicada para enfaixar e manter o curativo no lugar sem causar constrição ou compressão. Ela fornece uma elasticidade leve tanto no comprimento quanto na largura, dando aos pacientes liberdade total de movimento¹⁰⁻¹¹.

Exufiber® Ag+

Curativo de fibras gelificantes, composto por 100% de fibras de PVA (álcool polivinílico), e é indicado para queimaduras com alto nível de exsudato. Com sulfato de prata 0.2mg/cm², possui rápida ação à um amplo espectro de microrganismos, além de prevenir a reformação do biofilme. Sua tecnologia Hydrolock: promove alta absorção e retenção de exsudato; se gelifica, mantendo a umidade ideal no leito; permite a remoção em peça única, não deixando resíduos; absorve e transfere o exsudato do leito evitando extravasamento e macerações.

Limpeza

Granudacyn®

Solução de irrigação para limpeza e hidratação de feridas, como queimaduras de primeiro e segundo grau. O NaClO e HClO presentes em sua composição atuam na prevenção e eliminação de bactérias e fungos presentes na ferida, auxiliando também no controle do odor. Granudacyn® não é citotóxico ou irritante*.



Mepiform®
Curativo de silicone autoadesivo para prevenção e tratamento de cicatrizes hipertróficas e queloides¹²⁻¹³ que pode ser usado de modo ininterrupto desde a primeira aplicação*. Ele se adapta bem ao contorno do corpo, é fino, flexível e pode ser usado no banho¹².

Após a cicatrização da queimadura

Safetac TECHNOLOGY



*Remove o curativo uma vez por dia para inspeção e lavagem da pele. O curativo então pode ser aplicado novamente.

Controle de exsudato/barreira antimicrobiana – opções de curativo

Mepilex® Ag

Curativo em espuma antimicrobiana para queimaduras com exsudação baixa a média. Ele absorve o exsudato e mantém um ambiente úmido para a ferida². Proporciona uma ação antimicrobiana de amplo espectro rápida (a partir de 30 minutos) e sustentada por até sete dias, como mostrado in vitro¹⁶. Com a tecnologia Safetac, sela e protege as bordas da ferida de maceração e permite a remoção do curativo sem dor e trauma.

Mepilex® Transfer Ag

Curativo de transferência de exsudato em espuma antimicrobiana para queimaduras com exsudato e áreas de difícil aplicação de curativo¹⁷. É projetado para permitir que o exsudato seja transferido para um curativo secundário para inativar patógenos relevantes para a ferida (bactérias e fungos) dentro de 30 minutos por até 14 dias, como mostrado in vitro¹⁷⁻¹⁸.

Mepitel® Ag

Camada de contato suave para feridas, indicada para queimaduras exsudativas, enxertos de pele e áreas de difícil cobertura, em combinação com um curativo secundário². Demonstrou inativar patógenos relevantes para a ferida (bactérias e fungos) em até 4 horas e por até 8 dias, conforme demonstrado in vitro¹⁹.



Aviso legal: Sempre consulte as instruções de uso fornecidas com o dispositivo médico antes do uso.

* Referência: Kramer A, Dissemond J, Kim Setal. Consensus on wound antiseptics: update 2018. Skin Pharmacol Physiol. 2018;31:28–58. <https://doi.org/10.1159/000481545>

Mepilex® Ag – uma solução comprovada para queimaduras

Mepilex® Ag é um curativo de espuma antimicrobiano versátil e macio que absorve o exsudato e mantém um ambiente úmido para a ferida, especificamente desenvolvido para tratar queimaduras².

A camada de contato Safetac® impede a adesão do curativo ao leito da ferida, minimizando a dor e o trauma durante remoção²⁻³.

Mepilex Ag mostrou contribuir para a redução do tempo de enfermagem durante a primeira aplicação do curativo e redução da dor na remoção em comparação a outras opções de curativos em uma população pediátrica^{2,4}.

Comparado à sulfadiazina de prata, os resultados do RCT mostram que o Mepilex® Ag leva a uma redução no a tempo de hospitalização, redução na dor durante o uso e menor custo total do tratamento³.

Respondendo ao que os especialistas em queimaduras buscam em um curativo

Em um estudo de 2021, 196 especialistas de 49 países foram solicitados a listar as características mais importantes de um curativo ideal para ferida de queimadura²⁶. Mepilex® Ag cumpre 7 de 11 critérios importantes.

- ✓ Propriedades antimicrobianas
- ✓ Autoadesivo
- ✓ Redução da dor
- ✓ Não aderência ao leito da ferida
- ✓ Disponível em vários tamanhos
- ✓ Requer menos trocas de curativo
- ✓ Não volumoso

15 provas, incluindo
7 RCTs ≥ 1,100
pacientes²⁻⁶



Queimaduras que exigem intervenção

Áreas doadoras e enxertos de pele costumam ser tão dolorosos quanto a queimadura em si. Portanto, é uma prioridade reduzir a dor e suportar a cicatrização da ferida sem intercorrências em um paciente que já está em uma situação vulnerável.

Área doadora



Mepitel® One

Membrana de poliuretano perfurada, transparente, fina e flexível. Composto por camada de contato com Safetac, reduz dor e trauma. Sua estrutura perfurada permite que o exsudato seja transferido para a cobertura secundária e sua transparência permite a visualização da ferida sem necessidade de remover o curativo. Tempo de permanência até 14 dias.

ou



Mepilex® Transfer Ag

Curativo de transferência de exsudato em espuma antimicrobiana para queimaduras com exsudato e áreas de difícil aplicação de curativo¹⁷. É projetado para permitir que o exsudato seja transferido para um curativo secundário enquanto inativa patógenos relevantes para a ferida (bactérias e fungos) dentro de 30 minutos por até 14 dias, como mostrado in vitro¹⁷⁻¹⁸. Com a tecnologia Safetac, sela e protege as bordas da ferida de maceração e permite a remoção do curativo sem dor e traumas.

Fixação de enxerto de pele

Baixo risco de infecção:




Mepitel® One

Safetac
TECHNOLOGY

+ Curativo secundário

Membrana de poliuretano perfurada, transparente, fina e flexível. Composto por camada de contato com Safetac, reduz dor e trauma e mantém a estabilidade do enxerto. Sua estrutura perfurada permite que o exsudato seja transferido para a cobertura secundária e sua transparência permite a visualização da ferida sem necessidade de remover o curativo. Tempo de permanência até 14 dias.

Alto risco de infecção:

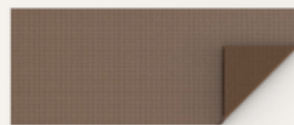

Mepitel® Ag

Safetac
TECHNOLOGY

+ Curativo secundário

Camada de contato antimicrobiana suave para feridas, que permite a passagem adequada do exsudato para o curativo secundário e se adapta bem às áreas de enxerto², se mantendo seguro e fixado no lugar. Demonstrou inativar patógenos relevantes para a ferida (bactérias e fungos) em até 4 horas e por até 8 dias (in vitro)¹⁹

Guia

de seleção de produto para queimaduras

Aviso legal: Sempre consulte as instruções de uso fornecidas com o dispositivo médico antes do uso.

Referências:
1. GeeKee EL, Kimble RM, Cuttle L, Khan A, Stockton KA. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns 2015, 41(5):946-955. 2. Silverstein P, Heimbach D, Meites H et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver containing soft silicone foam dressing (intervention) vs silver sulfadiazine cream. J Burn Care Res 2011, 32(6): 617-626. 3. Gee Kee EL, Stockton K, Kimble RM et al. Cost-effectiveness of silver dressings for paediatric partial thickness burns: An economic evaluation from a randomized controlled trial. Burns 2017, 43(4): 724-732. 4. Aggarwala S, Harish V, Roberts S et al. Treatment of partial thickness burns: a prospective, randomised controlled trial comparing Biobrane, Acticoat, Mepilex Ag and Aquacel Ag. J Burn Care Res 2020, 42(5): 934-43. 5. Tang H, Lv G, Fu J et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter investigation evaluating the efficacy and tolerability of Mepilex Ag versus silver sulfadiazine in the treatment of deep partial-thickness burn injuries. J Trauma Acute Care Surg 2015, 78(5): 1000-1007.

Queimaduras

Limpeza



Controle de exsudato/barreira antimicrobiana

Grau	Opção 1	Opção 2
1º grau	 Mepitel® One	 Mepitel® Film
Pouco à médio exsudato 2º grau 3º grau	 Mepilex® Ag	 Mepilex® Transfer Ag
Alto exsudato 2º grau 3º grau	 Mepilex® Ag	 Exufiber® Ag

FixaçãoGerenciamento de cicatrizes



Tubifast®



Tubifast® Garments



Mepiform®

Área doadora

 Mepilex® Transfer Ag

— ou —

 Mepitel® One


 Mepilex® Transfer

Fixação de enxerto de pele

Baixo risco de infecção

 Mepitel® One + Curativo Secundário

Alto risco de infecção

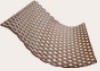 Mepitel® Ag + Curativo Secundário

O Poder da Gentileza

References:

1. Upton D, Solowiej K. Pain and stress as contributors to delayed wound healing. Wound Practice and Research 2010, Vol. 18(3). 2. Gee Kee EL, Kimble RM, Cuttle L, Khan A, Stockton KA. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns 2015, 41(5):946-955. 3. Silverstein P, Heimbach D, Meites H et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver containing soft silicone foam dressing (intervention) vs silver sulfadiazine cream. J Burn Care Res 2011, 32(6): 617-626. 4. Gee Kee EL, Stockton K, Kimble RM et al. Cost-effectiveness of silver dressings for paediatric partial thickness burns: An economic evaluation from a randomized controlled trial. Burns 2017, 43(4): 724-732. 5. Aggarwala S, Harish V, Roberts S et al. Treatment of partial thickness burns: a prospective, randomised controlled trial comparing Biobrane, Acticoat, Mepilex Ag and Aquacel Ag. J Burn Care Res 2020, 42(5): 934-43. 6. Tang H, Lv G, Fu J et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter investigation evaluating the efficacy and tolerability of Mepilex Ag versus silver sulfadiazine in the treatment of deep partial-thickness burn injuries. J Trauma Acute Care Surg 2015, 78(5): 1000-1007. 7. Gleeson AP, Stuart MJ, Wilson B, Phillips B. Ultrasound assessment and conservative management of inversion injuries of the ankle in children: Plaster of Paris versus tubigrip. Journal of Bone and Joint Surgery - Series B 1996, 78(3):484-7. 8. Naeem M, Rahimnadjad MK, Rahimnadjad NA, Idrees Z, Shah GA, Abbas G. Assessment of functional treatment versus plaster of Paris in the treatment of grade 1 and 2 lateral ankle sprains. Journal of Orthopaedics and Traumatology 2014, 16(1):41-6. 9. Mölnlycke Health Care. Data on file. Tubigrip. 10. Eytier C, Gazeau E, Beneteau G, Verfaillie G. Convenience and tolerance of the combination of a soft silicone foam dressing and a two-way stretch tubular bandage in the management of local wounds. Journal des plaies et cicatrisations 2013, 18(88):38-44.11. Mölnlycke Health Care. Data on file. Tubifast. 12. Mölnlycke Health Care. Data on File. Mepiform. 13. Wigger-Albert W, Kuhlmann M, Wilhelm D, Mrowietz U, Eichhorn K, Ortega J, et al. Efficacy of a polyurethane dressing versus a soft silicone sheet on hypertrophic scars. Journal of wound care 2009, 18(5):208, 10-4. 14. Armstrong DG, Bohn G, Glat P, Kavros SJ, Kirsner R, Snyder R et al. Expert recommendations for the use of Hypochlorous solution: science and clinical application. Ostomy Wound Manage 2015, 61 (5 suppl): 4S-18S 15. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018, Skin Pharmacol Physiol 2018;31:28-58. 16. Chadwick P, Taherinejad F, Hamberg K, Waring M. Clinical and scientific data on a silver-containing soft-silicone foam dressing: an overview. Journal of Wound Care 2009, 18(11):483-491. 17. Mölnlycke Health Care. Data on file. Mepilex Transfer Ag. 18. Schweiger H, Smith D, Cruse CW et al. An open, non-controlled, single-centre, clinical investigation to evaluate efficacy when using a soft silicone wound contact layer containing silver. Poster presentation at the 15th European Burns Association Congress, Vienna, Austria, 2013. 19. Mölnlycke Health Care. Data in file. Mepitel Ag. 20. Mölnlycke Health Care. Data on file. Melgisorb Plus. 21. Chadwick P, McCordle J. Open, non-comparative, multicenter post clinical study of the performance and safety of a gelling fibre wound dressing on diabetic foot ulcers. Journal of Wound Care 2016, 25(4): 290-300. 22. Smet, S., Beele, H., Saine, L., Suys, E., Henrickx, B. Open, non-comparative, multi-centre post market clinical follow-up investigation to evaluate performance and safety on pressure ulcers when using a gelling fibre dressing as intended. Poster Presentation at European Pressure Ulcer Advisory Panel Conference 2015, Ghent, Belgium. 23. Mölnlycke Health Care. Data on file. Exufiber. 24. David F. et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipidocolloid wound contact layer (UrigoTul) in the treatment of acute wounds. International Wound Journal 2018. 25. Mölnlycke Health Care. Data on file. Avance Solo. 26. Nischwitz SP, Luze H, Popp D, Winter R, Draschl A, Schellnegger M, Kargl L, Rappl T, Giretzlehner M, Kamolz LP. Global burn care and the ideal burn dressing reloaded—A survey of global experts. Burns 2021, 47: 1665-1674.

Granudacyn® - Registro ANVISA: 80733280031; Mepitel® One - Registro ANVISA: 80733280011; Mepilex® Ag - Registro ANVISA: 80733280023; Mepitel® Film - Registro ANVISA: 80733280001; Mepilex® Transfer Ag - Registro ANVISA: 80733280012; Exufiber® Ag - Registro ANVISA: 80733280022; Tubifast® - Registro ANVISA: 80733280009; Mepiform® - Registro ANVISA: 80733280024. Mepitel® Ag - Registro ANVISA 80733280034

Saiba mais em www.molnlycke.com.br

As marcas comerciais, os nomes e os logotipos Mölnlycke®, Mepilex®, Tubifast®, Exufiber®, Mepitel®, Mepiform®, Granudacyn® e Safetac® são registrados globalmente para um ou mais dos grupos de empresas Mölnlycke Health Care. ©2023 Mölnlycke Health Care AB. Todos os direitos reservados. BRMM-001053

