

Behandelgids voor veneuze beenulcera*

1. Reinigen en debrideren

Kies een milde huidreiniger met een pH-waarde die dicht bij die van de huid ligt om het wondbed en de omliggende huid te reinigen. Debrideer de wonde indien nodig. Verwijder fibrineus en dood weefsel, inclusief droge huid. Volg hierbij de lokale richtlijnen.



Granudacyn®



Mepi™ Debripad

2. Wondverband aanbrengen

Kies een verband met een siliconenlaag om de wonde en de omliggende huid te beschermen, terwijl het exsudaat effectief wordt opgenomen.

Is de wonde geïnfecteerd?

Antimicrobiële verbanden kunnen voor een korte periode worden gebruikt om wondinfecties te behandelen. Als er sprake is van een mogelijke infectie, raadpleeg dan de lokale richtlijnen of vraag advies aan een gespecialiseerde verpleegkundige.

Exsudaatniveau

Gebruik schuimverbanden voor matig tot veel exsudaat. Voor hogere exsudaatniveaus kan een combinatie van producten worden overwogen.



Niet geïnfecteerd




Geïnfecteerd



Mepilex® Up



Mextra® Superabsorbent

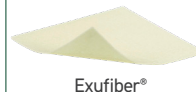


Exufiber®

en/of



Exufiber® Ag+

+

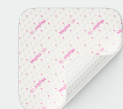

Mepilex® Up

3. Bevochtigen

Breng een eenvoudige emolliënt aan om de huidhydratie te herstellen.



Emolliënt

4. Compressie toepassen

Compressietherapie om genezing te verbeteren en een recidief te voorkomen.



Mepi™ Press 2
EAI
0,8-1,3



Mepi™ Press 2 Lite
EAI
0,6-0,8

Betrek uw patiënt

Moedig uw patiënten aan om actief en mobiel te blijven en geef advies over voeding en een gezonde levensstijl.



Safetac® technologie. Minder schade. Minder pijn.
Verbanden met Safetac® zijn klinisch bewezen om schade aan de wonde en de huid bij het verwijderen te beperken¹⁻⁶. Pijn bij verbandwissels wordt beperkt^{1-6,9}.



Scan de QR-code voor meer informatie

my.molnlycke.com

*Harding K, et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. Wounds International 2015.

1. Van Overschelde, P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 2. Silverstein P. et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver-containing soft silicone foam. Journal of Burn Care and Research, 2011. 3. Gee Kee E.L. et al. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns, 2014. 4. David F. et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipidocolloid wound contact layer (UrgoTul) in the treatment of acute wounds. International Wound Journal, 2017. 5. Patton M.L. et al. An open, prospective, randomized pilot investigation evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer vs. a split-thickness skin grafts as a primary dressing. Journal of burn care & research, 2013. 6. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Deutsche Arzteblatt International, 2018. 7. Meaume S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 8. Herst P. et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation-induced moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Radiotherapy and Oncology, 2014. 9. Gotschall C.S. et al. Prospective, randomized study of the efficacy of Mepitel on children with partial-thickness scalds. Journal of Burn Care & Rehabilitation, 1998.

Meer informatie op www.molnlycke.be

Molnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, 2600 Berchem, België. Tel. +32 (0)3 286 89 50.
De handelsmerken, namen en logo's van Molnlycke, Epaderm, Exufiber, Granudacyn, Granulox, Mepilex, Mextra, Safetac en Tubifast zijn wereldwijd geregistreerd door een of meer bedrijven van de Molnlycke Health Care Group. Mepi is een handelsmerk van Molnlycke Health Care. © 2025 Molnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden. BNWC00012509

