

Bon à savoir!

Lorsque vous nettoyez la peau avec un savon antiseptique, rincez abondamment et séchez la peau avant d’appliquer le pansement. Sinon les résidus de savon pourraient affecter la capacité du pansement à rester bien en place.

Ne pas étirer le pansement lors de l’application.
Évitez les plis.



Informations de commande
Mepilex® Border Post-Op

Réf. d'article	Taille (cm)	Unités/ emballage	Unités/ carton
496100	6 × 8	10	100
496200	9 × 10	10	100
496300	10 × 15	10	100
496400	10 × 20	10	30
496450	10 × 25	10	80
496600	10 × 30	10	40
496650	10 × 35	5	50

Proving it
every day

Mölnlycke® propose des produits innovants pour la prise en charge des plaies, des solutions améliorant la sécurité et l’efficacité au bloc opératoire, ainsi que pour la prévention et le traitement des escarres. Ces produits et solutions contribuent à de meilleurs résultats thérapeutiques et sont étayés par des preuves cliniques et économiques.

Tout ce que nous faisons a un seul objectif: Aider les professionnels de santé à donner le meilleur d’eux-mêmes afin qu’ils assurent les meilleurs soins possibles à leurs patients. Et nous nous efforçons de le prouver chaque jour.

Références: 1. Beele H. et al. Une étude clinique contrôlée, randomisée et prospective comparant deux pansements postopératoires utilisés après une arthroplastie élektive de la hanche et du genou; Mepilex® Border Post-Op versus Aquacel® Surgical. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2020. 2. Van Overschelde P, et al. Cicatrisation ininterrompue des plaies: étude rétrospective monocentrique étudiant les résultats rapportés par les patients et la validité clinique d’une durée de port prolongée du pansement pour la cicatrisation des incisions après une chirurgie orthopédique, l’étude ARCTIS. Journal of Wound Care, 2024. 3. Zarghooni K. et al. L’utilisation de pansements modernes par rapport à des pansements conventionnels est-elle justifiée après une arthroplastie primaire du genou et de la hanche? Acta Orthopaedica Belgica, 2015. 4. Bredow J. et al. Évaluation du pansement absorbant par rapport au pansement conventionnel. Étude contrôlée randomisée en chirurgie orthopédique. Deutsche Arzteblatt International (Journal médical allemand international), 2018.

Pour en savoir plus, allez sur www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care GmbH
Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Allemagne, Tél. +49 211 920 88 0
Wagenseilgasse 14, 1120 Vienne, Autriche, Tél. +43 1 2788542
Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Suisse, Tél. +41 44 744 54 00
Le nom Mölnlycke®, le logo Safetac et tous les produits mentionnés sont des marques déposées à l’échelle mondiale d’un ou de plusieurs membres du groupe Mölnlycke Health Care. ©2024 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés.

Jeter simplement
un coup d’œil.
Ne pas toucher.
Guide d’application



Mepilex® Border Post-Op
Cicatrisation postopératoire ininterrompue



Commencez toujours par nettoyer soigneusement la plaie et la peau périlésionnelle. Éliminez tous les résidus, par ex. les dépôts sur la plaie, les tissus adipeux et les résidus de solutions de rinçage de plaies. Assurez-vous que la peau est complètement sèche avant d'appliquer le pansement.

Guide de changement de pansement Mepilex® Border Post-Op



Retirez le pansement de son emballage stérile.



À l'aide de la languette, retirez le film protecteur restant sur le bord du pansement.



Enlevez le film protecteur entièrement ou partiellement et appliquez le pansement sur la peau.



Lissez le pansement sur la peau périlésionnelle pour obtenir une bonne étanchéité et une adhérence optimale.


Changer le pansement unique-ment lorsque cela est nécessaire

Mepilex® Border Post-Op est conçu pour **absorber et évacuer très efficacement** le sang du site de l'incision.¹ Il peut donc **rester en place jusqu'à 14 jours.**²

Si vous voyez du sang dans le pansement, ne pensez pas que vous devez le changer. Laissez le pansement sur la plaie et **changez le pansement uniquement si cela est nécessaire.**

Jeter simplement un coup d'œil. Ne pas toucher.

Ne pas changer le pansement!

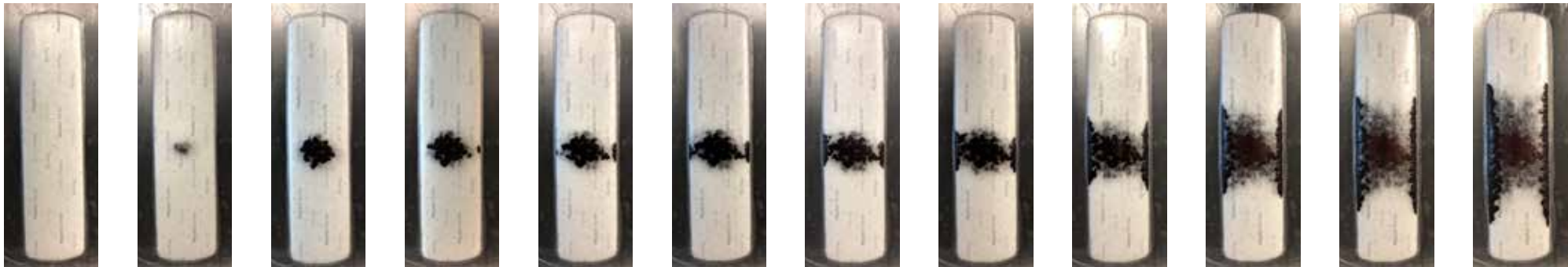

Changer le pansement!

