

Anvend din bandage korrekt

Patientinformation



Mepilex® Border Post-Op


Mölnlycke®



Din læge har valgt
bandagen Mepilex®
Border Post-Op
til dit operationssår.

Her er nogle oplysninger og tips!

Lad bandagen forblive på

Bandagen er beregnet til at blive siddende på så længe som muligt. Husk på, at den første bandage sættes på i det renest tænkelige miljø, operationsstuen. Hver gang man skifter den eller løfter den for at kigge, risikerer man at operationssåret bliver urent og dermed øges risikoen for infektioner. Så lad den blive på, lad være med at skifte eller løfte den, medmindre du får besked på dette af sundhedspersonalet.

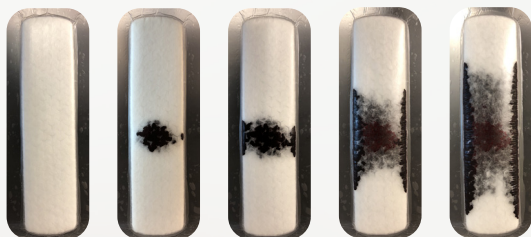
Hvis du bliver bedt om at skifte bandagen af sundhedspersonalet, kan du scanne QR-koden eller gå ind på www.my.molnlycke.dk for at få vejledning om skift/applisering.



Skift kun bandagen ved behov

Hvis der er blod på bandagen, skal du ikke være bekymret! Mepilex[®] Border Post-Op er udviklet til effektivt at absorbere store mængder blod. Blodet suges væk fra operationssåret og indkapsles i bandagens sårpude.

Ikke behov for bandageskift!



Behov for bandageskift!

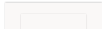
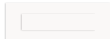


Ting at tænke over



- 1** I sjældne tilfælde, bløder dit operationssår så meget, at bandagen bliver helt fyldt op. Hvis det sker, skal du kontakte sundhedspersonalet og få råd.
- 2** Du kan tage et let brusebad med bandagen på. Gå ikke i karbad eller ud at svømme.
- 3** Når du tager tøj på skal du være forsigtig, så bandagen ikke bliver revet af.
- 4** Du skal ikke være bange for smerter i forbindelse med afgang af bandage. Bandagen er udviklet til at mindske smerter ved afgang. Der skal ikke bruges nogen speciel teknik. Tag bare fat i det ene hjørne, og træk den af.

Evt. særligt notat fra sygeplejersken:

	6 × 8cm	☐		10 × 20cm	☐
	6 × 12cm	☐		10 × 25cm	☐
	9 × 10cm	☐		10 × 30cm	☐
	10 × 15cm	☐		10 × 35cm	☐



Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød, Danmark. Tlf.: +45 80 886 810
e-mail: info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke og Mepilex varemærker, navne og logoer er registreret
globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen.
© 2025 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC3182503

