

Più della metà (58%) dei pazienti si lamenta che la propria medicazione tira o non si muove con il corpo⁷.

Progettata per conformarsi e rimanere applicata


Grazie alla Tecnologia Flex™, l'esclusiva conformabilità di Mepilex® Border Flex permette di adattarsi alla forma e ai movimenti del paziente². Riducendo la pressione sulla pelle e la trazione dei bordi aumenta il comfort e riduce al minimo il rischio di distacco⁸. Ed è resistente all'acqua in modo che i pazienti possano fare la doccia⁹.



Straordinaria Tecnologia Flex™ = flessibilità a 360°



I tagli a forma di Y si allargano per consentire il movimento

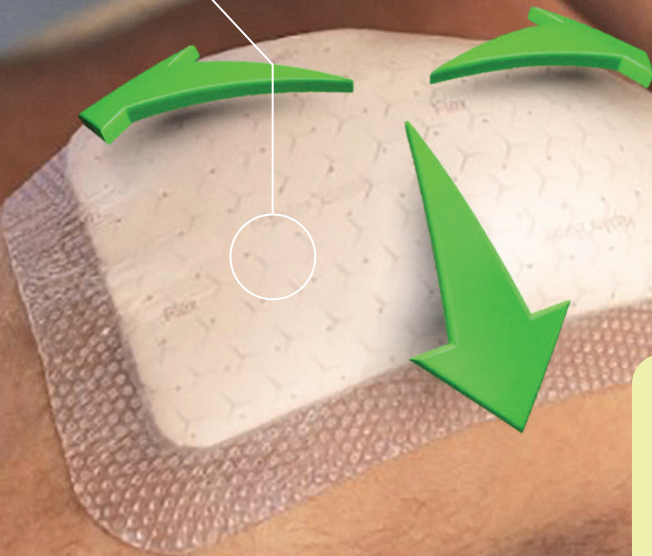

Mepilex® Border Flex è fino a **11x** più flessibile di altre medicazioni in schiuma bordata testate².

Mepilex® Border Flex può avere un impatto positivo sul tuo budget

Eseguiti in condizioni reali, due QIP individuali condotti in ambito ospedaliero negli Stati Uniti hanno dimostrato una sostanziale riduzione dell'utilizzo delle medicazioni rispetto alle medicazioni di precedente formulazione, pur mantenendo la traiettoria di guarigione delle ferite valutate. Il cambiamento del protocollo dovuto al tempo di usura prolungato di Mepilex Border Flex ha comportato un minor numero di cambi di medicazione, una riduzione documentata dei costi e un minor tempo di assistenza infermieristica.^{14,15}.

Visitate il sito molnlycke.com per scoprire come Mepilex® Border Flex può aiutare i vostri pazienti, il vostro team e il vostro budget.

Mepilex Border Flex

Codice	Misura (cm)	Dimensioni del tampone (cm²)	Pezzi per confezione
595200	7.5 x 7.5	4.5 x 4.5	50
595300	10 x 10	6.5 x 6.5	50
595000	12.5 x 12.5	8.5 x 8.5	50
595400	15 x 15	11 x 11	50
595600	15 x 20	11 x 16	50
595800	10 x 20	5 x 15	30
595850	10 x 25	5 x 20	30
595900	10 x 30	5 x 25	40



Mepilex Border Flex Oval

Codice	Misura (cm)	Dimensioni del tampone (cm²)	Pezzi per confezione
583500	7.8 x 10	15	50
583300	13 x 16	85	35
583400	15 x 19	134	45



Mepilex Border Flex Lite

Codice	Misura (cm)	Dimensioni del tampone (cm²)	Pezzi per confezione
581011	4 x 5	2 x 3	70
581100	5 x 12.5	2.5 x 8.5	65
581200	7.5 x 7.5	4.5 x 4.5	70
581300	10 x 10	6.5 x 6.5	50
581500	15 x 15	11 x 11	50



Scansionate questo codice QR per accedere ai dettagli del prodotto, alle guide applicative, per il cambio della medicazione e al foglio di istruzioni.



Stays On.
Si adatta in modo unico.



Mepilex® Border Flex
Mepilex® Border Flex Lite




References: 1. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Estimate of spreading area using dot pattern on backing film. Report no. PD-528872. Data on file. 2. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Conformability PD-528870. Data on file. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex-Bacteria encapsulation. Report no. PD-537072. Data on file. 4. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Spreading layer PD-528874. Data on file. 5. Mölnlycke Health Care. Product Manual – Maintained dressing profile. Report no. 525458. Data on file. 6. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 7. Opinion Matters 'Professional Health Care Treatment for Wounds' survey conducted June-July 2018 in UK. Data on file. 8. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – External data – FEM simulations Mx8 Flex vs Allevyn Life. Report no. PD-529747. Data on file. 9. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Waterproofness. Report no. PD-532095. Data on file. 11. Mölnlycke Health Care. Product manual Initial abs different test solutions. Report no. PD-535352. Data on file. 12. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;23(7):304-310. 13. Meaurio S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management. 2003. 14. Nelson, D. A New Bordered Foam Dressing Technology Improves Wound Outcomes and Satisfaction While Reducing Dressing Utilization in Acute Care. Poster Presentation at WOCN Annual Meeting, Nashville, 2019. 15. Tyson, L. Study First: Driving the Case for Improving Hospital Wound Care. Poster Presentation at WOCN Annual Meeting, Nashville, 2019.

Scopri di più su www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care S.p.A. Via Marsala 40/C Gallarate VA, Italia. Tel 0331 744011. I marchi commerciali, i nomi e i loghi Mölnlycke, Mepilex, Safetac sono registrati a livello globale a nome di una o più società del Gruppo Mölnlycke Health Care ©2024 Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati. ITWC0360425

Le ferite hanno bisogno di guarire. I pazienti hanno bisogno di cure. Gli infermieri hanno bisogno di tempo. I budget sono limitati. La sfida consiste nel trovare una medicazione che sia confortevole e che rimanga applicata per tutto il tempo necessario.

Presentazione della gamma Mepilex® Border Flex

La nostra nuova generazione di medicazioni flessibili è progettata per rimanere in sede e conformarsi in modo unico, con l'obiettivo di restituire tempo al personale infermieristico, risparmi ai dirigenti e qualità di vita ai pazienti.

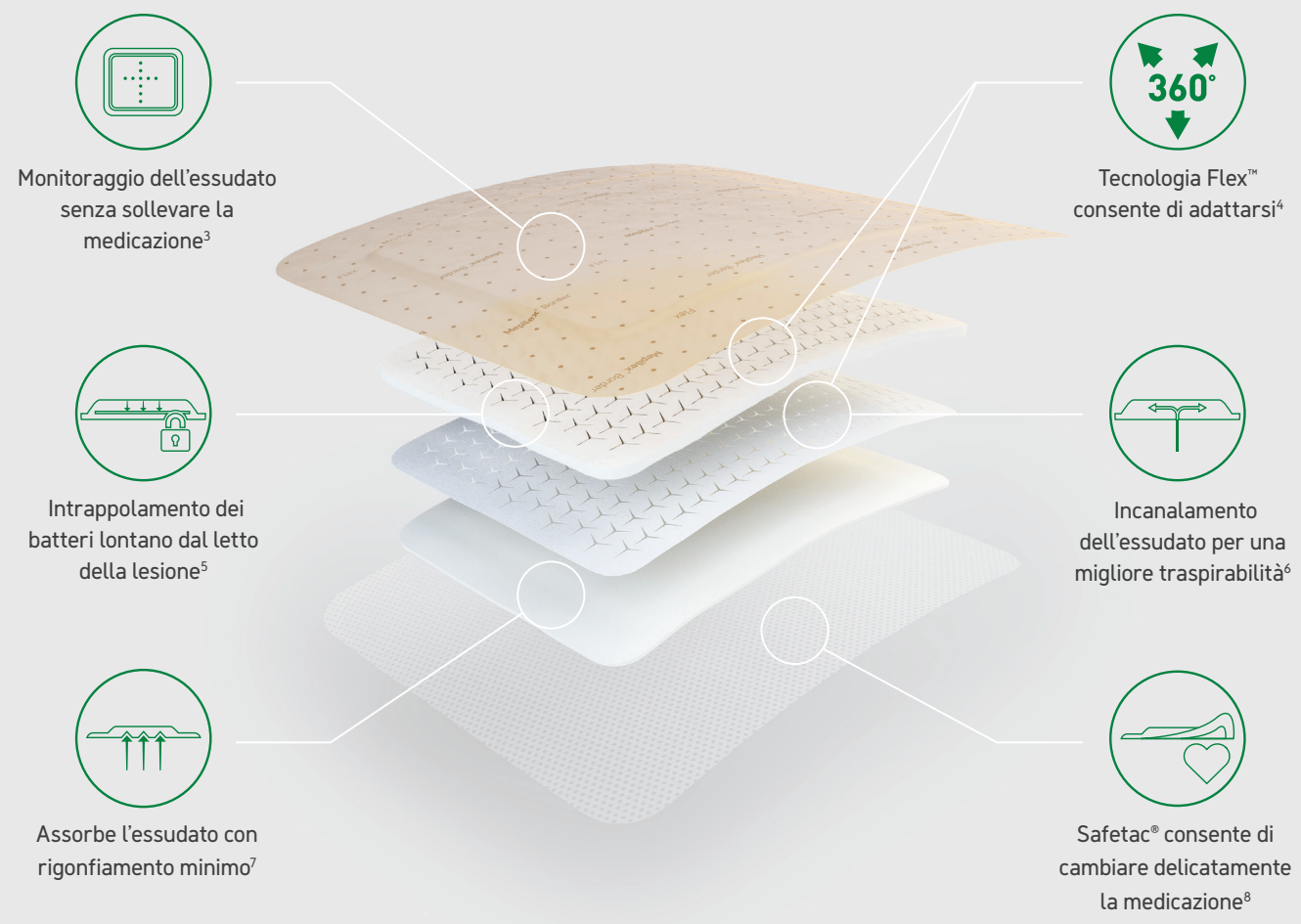


*Non disponibile per Mepilex Border Flex Lite

Scegliere la medicazione giusta per le esigenze del paziente

Progettata per un'ampia gamma di ferite essudanti, tra cui: ulcere delle gambe e dei piedi, ferite traumatiche (ad es. lacerazioni cutanee) e ferite chirurgiche, nonché come parte di una terapia profilattica per aiutare a prevenire danni alla pelle, ad esempio le ulcere da pressione.

Mepilex® Border Flex Lite

una medicazione a quattro strati con Flex Technology™ per ferite da non a moderatamente essudanti, disponibile anche in misure più piccole.

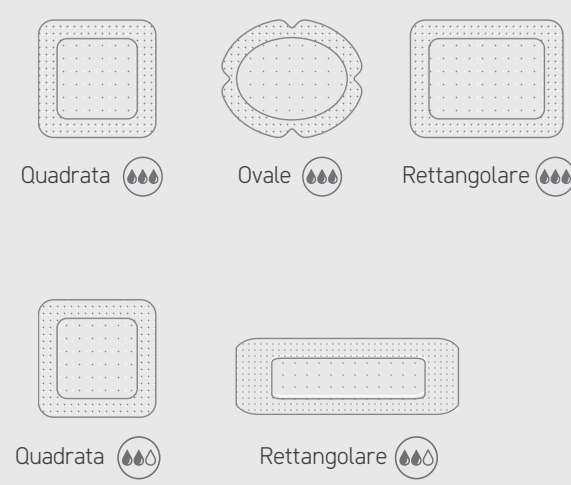

Fino a 1/3 dei pazienti sente la necessità di cambiare la medicazione ogni giorno⁷.

Gestione intelligente dell'essudato

Avrete la sicurezza di poter lasciare la medicazione per tempi maggiori continuando ad avere un ambiente di guarigione della ferita ottimale.

- 1. Rapidità di assorbimento con rigonfiamento minimo:**
Lo strato in schiuma consente rapidità di assorbimento sia dell'essudato normale che di quello viscoso^{9,10}.
- 2. Massimizza la capacità, incanalando l'essudato:**
L'essudato viene allontanato dalla ferita e diffuso su un'area più ampia, per incrementare la perdita di vapore acqueo e ridurre il rigonfiamento^{6,7}.
- 3. Trattiene i batteri lontano dalla ferita:**
Le fibre superassorbenti dello strato di ritenzione impediscono all'essudato batterico di accedere nuovamente al letto della ferita, anche sotto compressione⁵. La pellicola protettiva impedisce l'accesso ai batteri esterni¹¹.
- 4. Monitoraggio dell'e ssudato senza rimuovere la medicazione:**
Il Sistema di Monitoraggio dell'Essudato consente di valutare e registrare obiettivamente la diffusione dell'essudato, senza disturbare la ferita³.

*Non disponibile per Mepilex Border Flex Lite. **particelle/ microbi più grandi di 25 micro metri

Come funziona il Sistema di Monitoraggio dell'Essudato

Grazie al Sistema di Monitoraggio dell'Essudato, è possibile lasciare la medicazione applicata con tranquillità per un maggior periodo di tempo³.



* La frequenza dell'ispezione della ferita e del cambio della medicazione dipendono dalle decisioni cliniche e sono, pertanto, a discrezione del medico curante

9 pazienti su 10 sentono che la ferita incide sulla loro qualità di vita⁷.

Riduzione del dolore e dei danni alla cute

Tutte le medicazioni di Mepilex® Border Flex mirano a ridurre i traumi causati dal cambio di medicazione. Ciò è reso possibile grazie al nostro collaudato strato di contatto con la ferita in silicone morbido Safetac®, che riduce al minimo il dolore, i danni alla cute e il rischio di macerazione rispetto alle medicazioni tradizionali (adesive)^{6,12,13}.

Più di
9/10
pazienti hanno preferito le medicazioni con Safetac® rispetto ad altre medicazioni con adesivi tradizionali⁶

