

Kontinuerlig og effektiv behandling.
Uden at gå på kompromis.



Avance® Solo og Avance® Solo Adapt
- Bring healing home




Kliniske anvendelser af Avance® Solo og Avance® Solo Adapt

Avance® Solo er indiceret til brug på lukkede, kirurgiske incisioner og akutte eller kroniske sår. Avance® Solo Adapt er indiceret til brug på tryksår.

Klinisk formål med undertryksbehandling til kirurgiske incisioner¹



Reduktion af trækspændinger på incisionsstedet

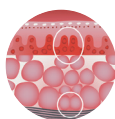


Reduktion/eliminering af deadspace i incisionen



Reduceret ødem, forbedret perfusion

Klinisk formål med undertryksbehandling på åbne sår²

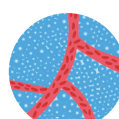

Fjernelse af ekssudat og væske




Optimeret sårheling



Dannelse af granulationsvæv

Et studie af behandlingens ydeevne viser:

Trykfald og tab af undertryk ses i systemer uden beholder, efterhånden som bandagen mættes. Avance® Solo er en kombination af flerlagsbandage og en beholder, hvilket sikrer at en effektiv undertryksbehandling kan leveres uafhængig af bandagens mætningsgrad³.

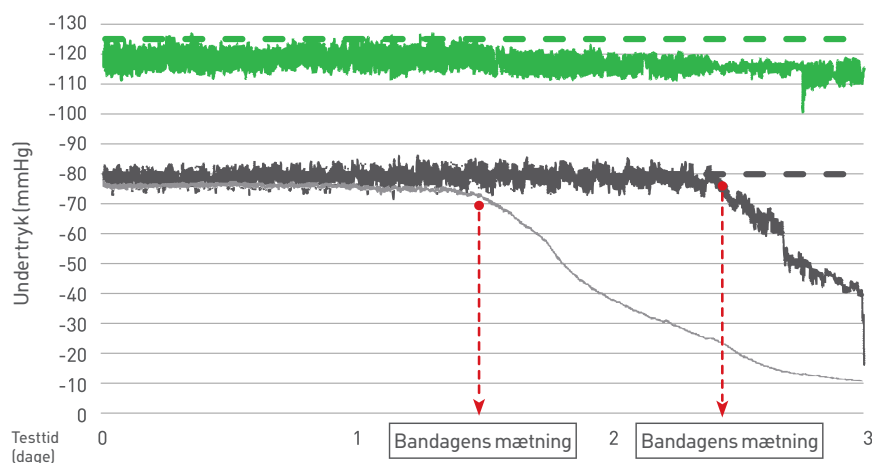

Avance Solo NPWT systemet leverer undertryk til sårområdet samtidig med, at det transporterer ekssudat fra såret til bandagen og beholderen⁴.

Grafen viser: Moderat væskende sår.

Resultater: Systemer uden beholder virker i 1,5-2,5 dage før tab af undertryksbehandling. Avance Solo leverer kontinuerlig undertryksbehandling i 7 dage.



Læs mere om studier af behandlingsydeevne
<https://www.avancesolo.dk/klinisk-brug/publikationer/>

CFM teknologien™ i Avance® Solo

CFM-teknologien (Controlled Fluid Management) er en kombination af kontrolleret luftgennemstrømning, en absorberende flerlagsbandage og en beholder. Dette gør det muligt for Avance® Solo undertrykssystemet at levere et kontinuerligt, reguleret undertryk til sårbunden ved at transportere eksudat fra såret til bandagen og om nødvendigt til beholderen på 50 ml⁴⁻⁶.



Valg af behandling baseret på risikovurdering

Vælg de relevante risikofaktorer for at identificere din **patients risikoprofil**

☐	☐	☐	☐	☐	☐
Diabetes	Fedme	ASA ≥ 3	Operationstid > 120 min.	> 75. percentil (for procedurevarigheder < 120 min.)	Sårklasse II (ren, kontamineret)

* Hvis patienten har sårklasse III eller IV eller skal opereres akut, skal patientens risikostatus betragtes som **høj** uanset status for enhver anden risikofaktor.

Risiko (bestemt af antallet af krydser i felterne nevenfor)



Lav



Moderat



Forhøjet



Høj*



Avanceret sårbandage

Avanceret sårbandage

Behandling med undertryk
(ciNPT)

Produktindikation

Mepilex® Border Post-Op



Produktindikation

Avance® Solo

Læs mere om risikovurdering
<https://www.molnlycke.dk/saar-typer/postoperativ-restitution/risikovurdering/>



Kontinuerlig og effektiv behandling. Uden at gå på kompromis.

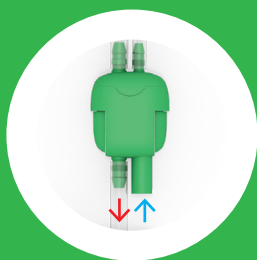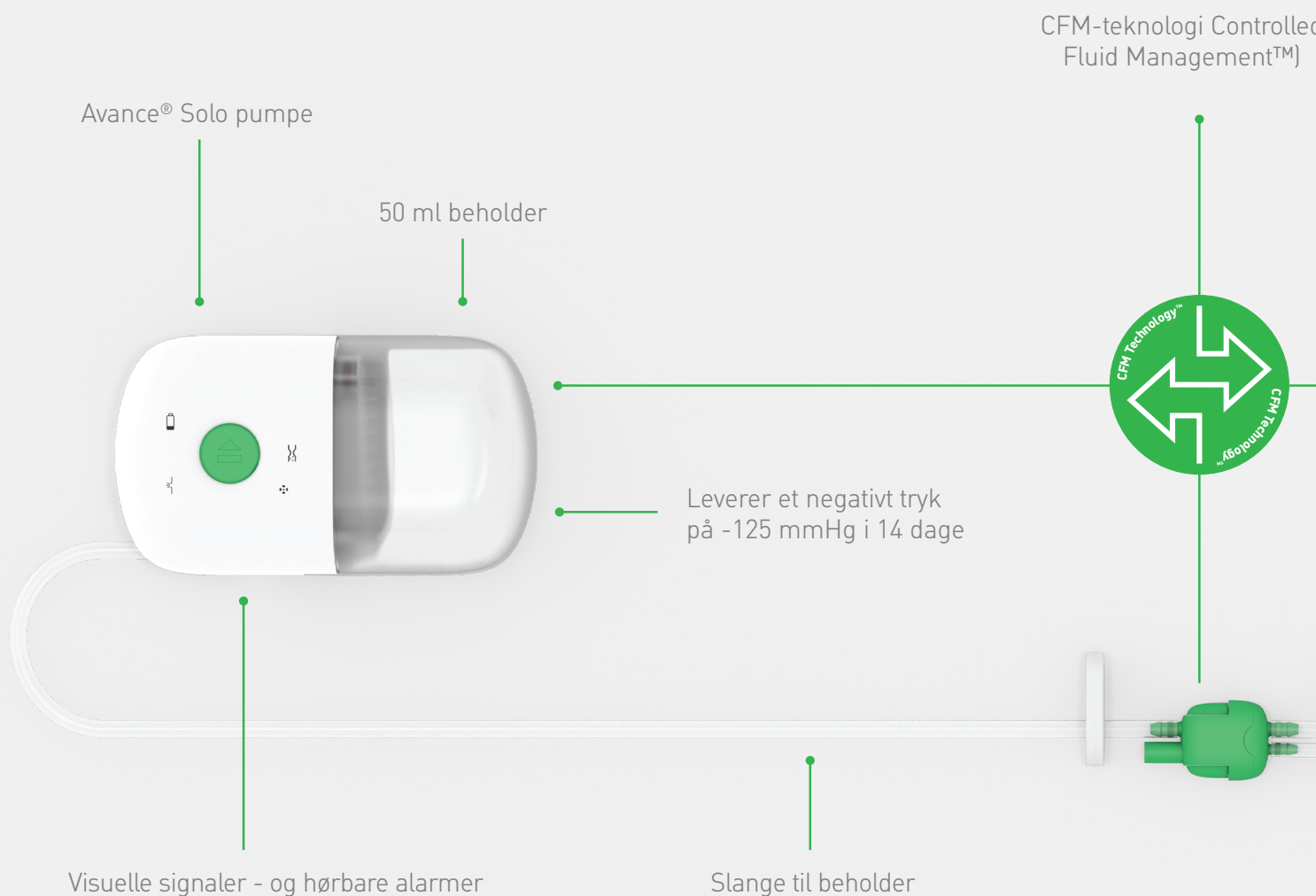

CFM Technology™


- Kontrolleret luftindtag sikrer, at der leveres kompromisløst, kontinuerligt undertryk til sårbunden, og at overskydende væske transporteres til bandagen eller beholderen^{4-5,8}.
- Avance Solo pumpens regelmæssige cyklus sikrer, at der kontinuerligt transporteres væske til bandagen eller beholderen, og at vakuummet opretholdes^{4,7}.



50 ml-beholder

- Overskydende væske overføres til beholderen⁴.
- Har til formål at reducere risikoen for, at bandagen bliver helt mættet⁴.
- Beholderen kan udskiftes af sundhedspersonale, plejere eller patienten selv⁸⁻¹⁰.

På www.avancesolo.dk finder du produktinformation, patienthistorier, patientcases, instruktionsvideoer og meget mere.

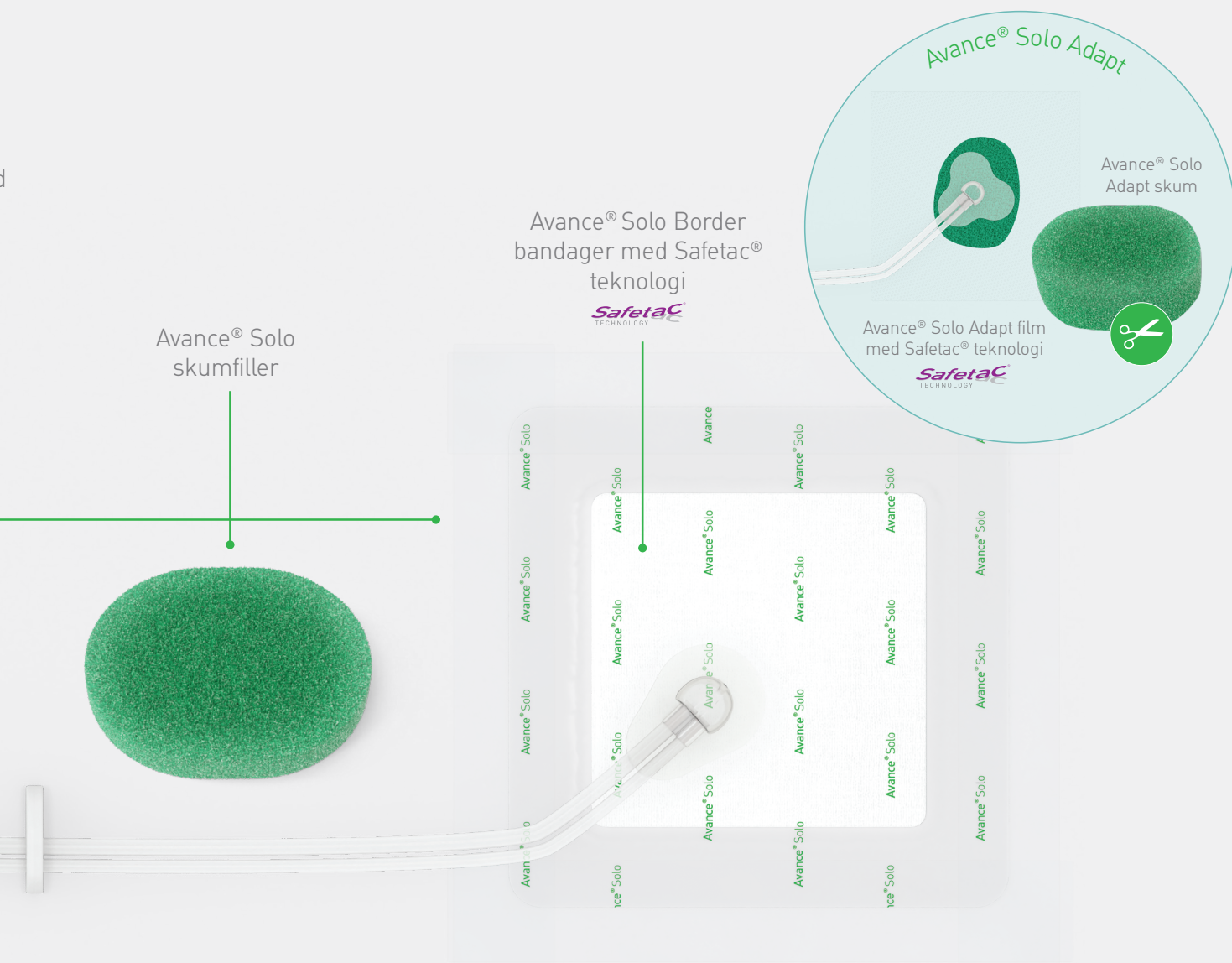

Avance Solo pumpe

- Regulerer trykket med henblik på at levere et kontinuerligt undertryk på -125 mmHg i 14 dage¹⁰.
- Visuelle og hørbare alarmer for lækage, blokering og lavt batteriniveau advarer straks om eventuelle problemer¹⁰⁻¹¹.
- Bærbar og letvægt^{10,12}.




Safetac® teknologi

- Sårkontakttag med blød silikoneklæb⁷.
- Gør det muligt at løfte og justere bandagen under appliceringen⁷.
- Minimerer skader på såret og huden ved aftagning¹³⁻¹⁸.
- Avance® Solo Adapt kan anvendes i kombination med Mepitel sårkontakttag med Mölnlyckes proprietære Safetac teknologi i blød silikone⁸⁻¹¹.

Avance® Solo og Avance® Solo Adapt Patient cases

Traumesår -
Knæ

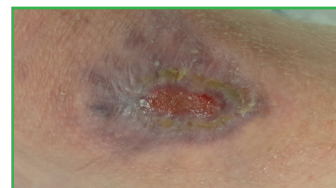

Traumesår -
Finger



Vaskulært
operationssår
i lysken



Diabetisk
fodsår -
lateralt
tryksår



Lapplastik -
ankel



Lapplastik -
pilonidalcyste



Kontakt din lokale Mölnlycke-repræsentant for at få flere oplysninger om patient cases.

Avance® Solo og Avance® Solo Adapt sortiment (pakket sterilt)


Varenr.	Avance Solo pumpe med beholder	Indhold af individuel, steril enhed	Stk./ inderkrt.	Stk./ trp.krt.
8880050	Avance Solo pumpe og beholder	Pumpe + beholder 50 ml med slange + 4 x AA-batterier + bælteclips	1	2
Varenr.	Avance Solo Border bandage	Indhold af individuel, steril enhed	Stk./ inderkrt.	Stk./ trp.krt.
881020	Avance Solo Border bandage – 10 x 20 cm	10 x 20 cm border bandage + 6 fikseringsstrimler 6 x 28 cm	2	4
881030	Avance Solo Border bandage – 10 x 30 cm	10 x 30 cm border bandage + 6 fikseringsstrimler 6 x 28 cm	2	4
881035	Avance Solo Border bandage – 10 x 35 cm	10 x 35 cm border bandage + 6 fikseringsstrimler 6 x 28 cm	2	4
881515	Avance Solo Border bandage – 15 x 15 cm	15 x 15 cm border bandage + 6 fikseringsstrimler 6 x 28 cm	2	4
881520	Avance Solo Border bandage – 15 x 20 cm	15 x 20 cm border bandage + 6 fikseringsstrimler 6 x 28 cm	2	4
881530	Avance Solo Border bandage – 15 x 30 cm	15 x 30 cm border bandage + 6 fikseringsstrimler 6 x 28 cm	2	4
882020	Avance Solo Border bandage – 20 x 20 cm	20 x 20 cm border bandage + 6 fikseringsstrimler 6 x 28 cm	2	4
882525	Avance Solo Border bandage – 25 x 25 cm	25 x 25 cm border bandage + 6 fikseringsstrimler 6 x 28 cm	2	4
Varenr.	Avance Solo startset med pumpe, beholder og border bandage	Indhold af individuel, steril enhed	Stk./ inderkrt.	Stk./ trp.krt.
8881020	Avance Solo sæt, 10 cm x 20 cm	Pumpe + beholder 50 ml med slange + 4 x AA-batterier + 10 x 20 cm border bandage + bælteclips + 6 fikseringsstrimler 6 x 28 cm	1	2
8881030	Avance Solo sæt, 10 cm x 30 cm	Pumpe + beholder 50 ml med slange + 4 x AA-batterier + 10 x 30 cm border bandage + bælteclips + 6 fikseringsstrimler 6 x 28 cm	1	2
8881035	Avance Solo sæt, 10 cm x 35 cm	Pumpe + beholder 50 ml med slange + 4 x AA-batterier + 10 x 35 cm border bandage + bælteclips + 6 fikseringsstrimler 6 x 28 cm	1	2
Varenr.	Avance Solo andre produkter	Indhold af individuel, steril enhed	Stk./ inderkrt.	Stk./ trp.krt.
880050	Avance Solo beholder 50 ml	Avance Solo beholder 50 ml med slange	4	8
882000	Avance Solo skum 1,5 x 10 x 12 cm	4 x sårfyldningsskum – 1,5 x 10 x 12 cm	4	8
Varenr.	Avance Solo Adapt sortiment	Indhold af individuel, steril enhed	Stk./ inderkrt.	Stk./ trp.krt.
9994152	Avance Solo Adapt pumpe, beholder, skum, film og overførselsport	Pumpe + beholder 50 ml med slange + 4 x AA-batterier + Safetac filmbandage 20 x 27 cm + skum 3 x 8 x 10 cm + bælteclips	1	2
994152	Avance Solo Adapt skum, film og overførselsport	Safetac filmbandage 20 x 27 cm + skum 3 x 8 x 10 cm + overførselsport og slange	5	5
994000	Avance Solo Adapt film 20 x 27 cm	Safetac filmbandage med klæb 20 x 27 cm	5	10
Varenr.	Avance Solo tilbehør	Usterile produkter, mål	Stk./ inderkrt.	Stk./ trp.krt.
890001	Bæretaske, lille	15 x 12 x 3,5 cm	1	8
890002	Bæretaske, stor	30,5 x 14,5 x 7,5 cm	1	8
5105100	Natboks	16,4 x 10,5 x 6,5 cm	1	7

Hvorfor vælge Avance® Solo?

Avance® Solo er et bærbart undertrykssystem til brug på en enkelt patient. Det leverer undertryk til sårstedet, samtidig med at eksudatet transporteres fra såret til en bandage og en beholder.

- Controlled Fluid Management (CFM) technology™ gør Avance® Solo NPWT systemet i stand til at levere kontinuerligt, reguleret undertryk til sårstedet ved at transportere eksudat fra såret til bandagen og beholderen⁴⁻⁶
- Leverer et kontinuerligt undertryk på -125mmHg i 14 dage¹⁰
- Safetac silikoneklæb, dokumenteret minimering af smerter og traumer på sårstedet og den omkringliggende hud ved aftagning¹³⁻¹⁸

Lær mere om Avance® Solo

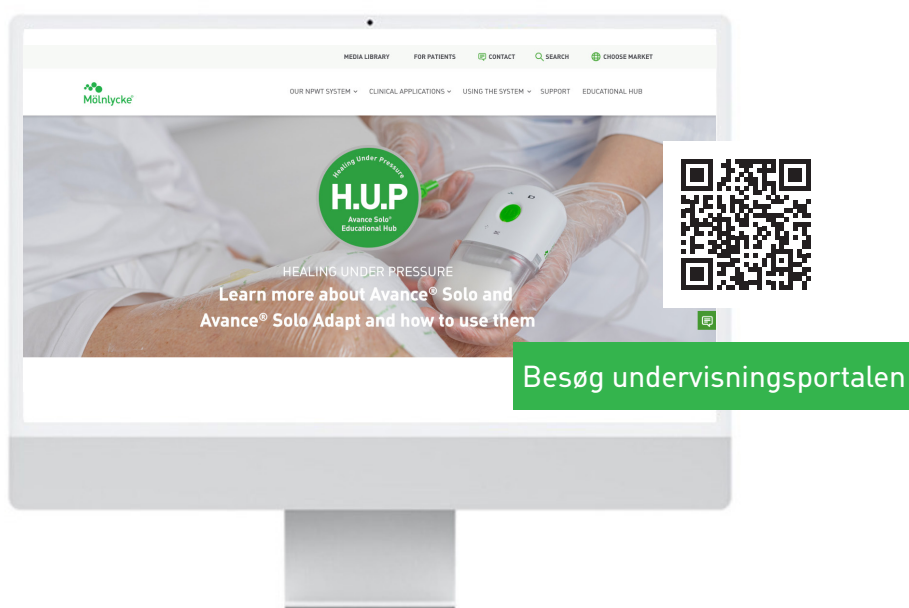

Yderligere information og support fås på:

www.avancesolo.dk

Referencer: 1. Willy C, Agarwal A, Andersen CA, Santis GD, Gabriel A, Grauhan O, Guerra OM, Lipsky BA, Malas MB, Mathiesen LL, Singh DP, Reddy VS. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. *Int Wound J* 2016; doi: 10.1111/iwj.12612. 2. Apelqvist J, Willy C, Fagerdahl A.M. et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. *J Wound Care* 2017; 26:3, Suppl 3, S1–S113. 3. Avance Solo–data forefindes (ref. 25). 4. Data forefindes (10). 5. Data forefindes (18). 6. Data forefindes (23). 7. Data forefindes (17). 8. Data forefindes (13). 9. Data forefindes (14). 10. Data forefindes (15). 11. Data forefindes (16). 12. Data forefindes (24). 13. Van Overschelde, P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 14. Silverstein P. et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver-containing soft silicone foam. *Journal of Burn Care and Research*, 2011. 15. Gee Kee E.L. et al. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. *Burns*, 2014. 16. David F. et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipidocolloid wound contact layer (UrgoTul) in the treatment of acute wounds. *International Wound Journal*, 2017. 17. Patton M.L. et al. An open, prospective, randomized pilot investigation evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer vs. a standard dressing on split thickness skin grafts as a primary dressing. *Journal of burn care & research*, 2013. 18. Bredow J. et al. Randomised clinical trial to evaluate performance of flexible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. Poster presentation at WUWHS Congress, Italy, 2016.